

SENCOR®

SOI 1010SL



SZÁJZUHANY

Az eredeti útmutató fordítása

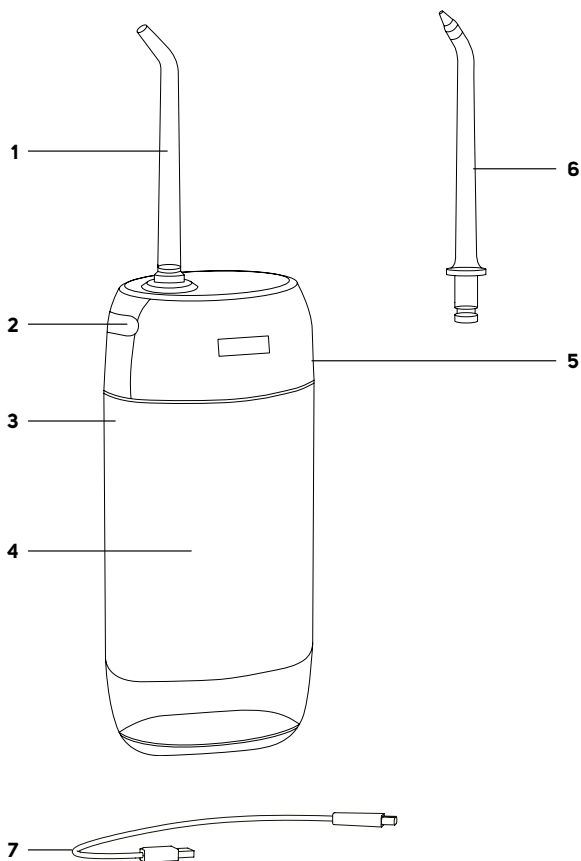


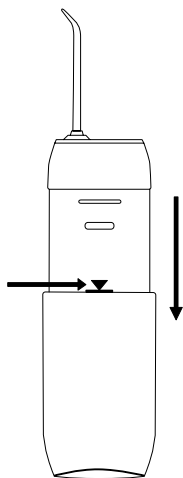
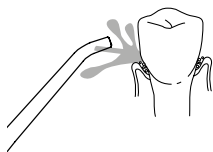
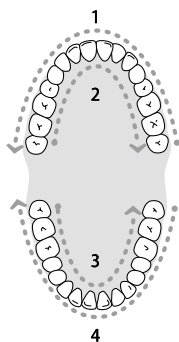
SENCOR®

SOI 1010SL



A



B**C**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A szájzuhanyt 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek kizárólag felügyelet alatt használhatják.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízva szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket sérült tápkábelrel használni tilos.
- A szájzuhanyt csak hideg vagy meleg vízzel vagy a jelen kézikönyvben meghatározott speciális oldatokkal szabad használni.
- A készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell rögzíteni vagy felállítani, hogy ne essenek a vízbe.



Figyelmeztetés:

A termikus biztosíték hirtelen visszaállása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely időszakosan be- és kikapcsol.

- A készülék csak kis, biztonságos feszültségen lehet táplálva, ami megfelel a készülék típuscímkéjén jelzettnek.
- A hálózati adapter nem a csomagolás része.

Elektromos biztonság

- A töltőkábelt ne tegye éles tárgyakra. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen felforrósodott felülettel.
- Soha ne használja a készülékhez mellékelt töltőkábelt más célra.
- A töltőkábelt tartsa szárazon.
- Ne tekerje a töltőkábelt a készülék fogantyúja köré.
- Ne csatlakoztassa vagy válassza le a töltőkábelt nedves kézzel.
- A kábel tápforráshoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel a csatlakoztatni kívánt forrás feszültségének. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Tárolja, töltsen és használja a készüléket 15 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne töltsen a készüléket a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig. A töltés befejezése után válassza le a tápforrásról.
- Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor károsodhat.

- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelynek élettartama hosszú, és csak szakszerviz cserélheti ki. Soha ne próbálja meg egyedül kivenni a készülékből és kicserélni.



Figyelem:

Az akkumulátor eltávolításához soha ne szerelje szét a készüléket. A készüléket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye.

- Ne töltsé, használja, tárolja vagy hagyja a készüléket a fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol kádba, mosdóba vagy más vízzel teli edénybe eshet.
- Ha a készüléket adapterrel a hálózathoz lett csatlakoztatva és a tápkábellel együtt vízbe esik, ne érintse meg semmilyen módon, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

Biztonság használat közben

- Ez a szájuhány kizárólag fogmosásra és személyes szájhigiénéiára szolgál. A szájuhány nem használható kereskedelmi célokra vagy állatok fogainak mosására.
- A szájuhányt és toldóelemeit csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- Ha a közelmúltban intenzív beavatkozáson, például fogászati vagy fogínyműtéten esett át, hosszú távú fogászati problémái voltak, vagy fogászati problémákra (tömések, koronák stb.) gyanakszik, a szájuhány használata előtt konzultáljon fogorvosával.
- Ha a szájuhány használata után fogínyvérzést tapasztal, vagy a vérzés nem áll el 2 hét használat után, forduljon fogorvosához.
- Ha bármilyen egészségügyi problémája van, a szájuhány használata előtt konzultáljon a fogorvosával.
- Ha a szájuhány (fogantyú vagy hálózati adapter) megsérül, hagyja abba a használatát.
- Csak a szájuhánnal együtt szállított eredeti tartozékokat használja. Ne használjon a gyártó által szállított tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- A szájuhányt és a hálózati adaptert csak beltérben szabad használni. Ne használja a szabadban.
- Ne használja a szájuhányt olyan helyiségben, ahol aeroszol adagolókat használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- A szájuhányt és tartozékait ne tegye ki kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- A szájuhányt és tartozékait ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.



Figyelem:

A szájuhányt tartsa szárazon.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szájuhány és a toldóelemei nem sérültek-e. Soha ne használja a szájuhányt sérült toldóelemmel.
- Használat vagy töltés közben a szájuhány picit felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne fejtse ki túl nagy nyomást a fúvóka csatlakozójának végére.
- A sérülések elkerülése érdekében ne töltsé fel a tartályt forró vízzel. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tartályba.
- Ne irányítsa a tartozék fúvókáját a nyelve alá, a fülébe, az orrába, a szemébe vagy más érzékeny területre, mert ez sérülést okozhat.
- Ne tisztítsa a fúvóka toldóelemet, a fogantyút, a hálózati adaptert vagy a víztartályt mosogatógépben vagy mikrohullámú sütőben.

- A szájuhanyt mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt. A szájuhanyt és a hálózati adaptert tárolja száraz környezetben.
- A szájuhanyt tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A Tisztítás és karbantartás fejezetben meghatározott tisztításon kívül ne végezzen más karbantartást a szájuhanyon.
- Ne használja a szájuhanyt, ha a földre esett, nem működik megfelelően, vagy bármilyen módon megsérült.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a szájuhanyt és tartozékait ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A bármilyen javításhoz lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jóálláshoz fűződő törvényes jogát.

Speciális biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorhoz

- A Li-ion akkumulátor be van építve a szájuhanyba és annak szerves részét képezi, amelyet a felhasználó nem távolíthat el.
- Tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Ha folyadék (elektrolit) szivárog az akkumulátorból, ne érintse meg pusztá kézzel. Viseljen védőfelszerelést (kesztyű, védőmaszk, védőszemüveg stb.). Az akkumulátor belsejében lévő folyadék mérgező, és egészségügyi problémát okozhat még akkor is, ha enyhén érintkezik a csupasz bőrrel.
- Javasoljuk, hogy nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat, hogy biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.
- Vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó vállalattal, vagy használjon veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló berendezést. A sérült elemet vagy akkumulátort ne dobja a szokásos vegyes hulladékba.
- Bőrré vagy szembe jutás esetén mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon szakorvoshoz.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum az akkumulátoron vagy az elemen azt jelzi, hogy a használt akkumulátort vagy elemet nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Vízbehatolás elleni védelem:

IPX7 – A készülék 30 percig 1 méteres mélységbe merítve védve van a víz káros behatolása ellen.

HU Szájzuhany

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A SZÁJZUHANY LEÍRÁSA

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| A1 | Standard fűvókás toldóelem (1 db) | A5 | Töltőaljzat kupakkal |
| A2 | Fűvókás toldóelem kioldó gomb | A6 | Ortodontális toldóelem (1 db) |
| A3 | ⏻ gomb a be-/kikapcsoláshoz | A7 | Töltőkábel |
| A4 | Víztartály | | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A szájzuhany kizárólag szájhygiénára szolgál. Segít eltávolítani a baktériumokat a fogközökből és a fogak körüli nyregedőkből, gyorsan és finoman eltávolítja az ételmaradékot a fogközökből, miközben hatékonyan masszírozza az ínyt. A gondos fogmosással kombinálva segít aktívan gondoskodni a fogak egészségéről. A szájzuhany háztartási használatra készült, nem üzleti vagy egyéb szakmai használatra.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Öblítse le a toldóelemet folyó csapvíz alatt.
- Öblítse ki többször a víztartályt mosogató felett, és töltsze fel tiszta vízzel a Vízartály feltöltése című fejezetben leírtak szerint. Helyezze a toldóelemet a szájzuhanyba a Toldóelem csatlakoztatása és eltávolítása fejezet szerint. Irányítsa a toldóelem fűvókáját a mosogatóba, és kapcsolja be a szájzuhanyt a ⏻ gombbal. Válassza ki az egyik üzemmódot, és hagyja, hogy a víz egy ideig átfolyjon a fűvókán, hogy átöblítse mind a szívócsövet, mind a toldóelem fűvókát.
- Öntse ki a tartályból a maradék vizet, és hagyja nyitva a betöltőnyílás fedelét, hogy a tartály kiszáradjon.
- Törölje szárazra a szájzuhanyt.

A SZÁJZUHANY TÖLTÉSE

- A szájzuhany beépített lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely belső áramforrásként szolgál, és lehetővé teszi a szájzuhany vezeték nélküli használatát. Első használat előtt vagy hosszú használaton kívüli időszak után először teljesen töltsze fel a szájzuhany akkumulátorát.

Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3,5 órát vesz igénybe. A szájuhany töltéséhez csak eredeti töltőkábelt használjon.

- Távolítsa el a töltőaljzat fedelét, és csatlakoztassa hozzá a töltőkábel csatlakozóját. Csatlakoztassa a szabad csatlakozót egy megfelelő hálózati adapterhez (nem a csomag része).
- A szájuhany töltése közben a töltésszjelző villog. Amikor abbahagyja a villogást és kialszik, a szájuhany teljesen fel van töltve.
- Húzza ki a kábelt az aljzathoz és a töltőforrásból. Csúsztagassa vissza a fedelet az aljzatba.
- Ha a töltésszjelző villog a szájuhany működése közben, az azt jelenti, hogy a szájuhany hamarosan lemerül, és fel kell tölteni.



Figyelmeztetés:

A töltőaljzat vagy annak fedele körül nem lehet nedvesség. Ezért javasoljuk, hogy a töltőkábel csatlakoztatása előtt törölje meg a területet egy száraz törlerönggyel.



Figyelmeztetés:

Ne hagyja a szájuhanyt a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig külső áramforráshoz csatlakoztatva.



Megjegyzés:

Töltés közben a szájuhany használata blokkolva van, és nem indítható el.

- Ajánlások a lehető leghosszabb akkumulátor-élettartam elérésére:
 - Annak érdekében, hogy a beépített akkumulátor a lehető leghosszabb ideig működjön, töltsse fel, használja és tárolja a szájuhanyt 15-35 °C-os környezeti hőmérsékleten, száraz környezetben. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet hátrányosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
 - Ne várja meg, amíg az akkumulátor teljesen lemerül. Jobb, ha újratölti az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne.
 - Ha hosszú ideig nem használja a szájuhanyt, legalább 6 havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Nyissa ki a tartály töltőnyílás kupakját.
2. Húzza felfelé a víztartályt, amíg meg nem jelenik a vízszint szimbóluma - lásd a B ábrát.
3. Tartsa vízszintesen a szájuhanyt, és öntsön tiszta vizet a tartályba.
4. Zárja le megfelelően a fedelet, majd állítsa vissza a szájuhanyt függőleges helyzetbe.



Figyelmeztetés:

A víznek kellemes hőmérsékletűnek kell lennie. Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.



Megjegyzés:

A víztartály lehúzása ELŐTT nyissa ki a töltőnyílás kupakját. Ellenkező esetben a tartály lehúzása túlnyomás miatt nehézkes lehet.

Tipp:

- A tiszta víz mellett szájvízzel vagy annak oldatával is feltöltheti a víztartályt. A szájvíz használata még hatékonyabbá teszi a szájuhany használatát. Ne használjon azonban izopropil-mirisztátot vagy nagy koncentrációban illóolajokat tartalmazó szájvizet. Ezek az anyagok üveg- és kerámiatartályokban kaphatók szájvizekben található, és károsíthatják a víztartályt, valamint a szájuhany belsejét. A szájuhanyra ártalmatlan anyagokat tartalmazó szájvizek műanyag tartályokban kaphatók.

A TARTOZÉK RÖGZÍTÉSE ÉS KIVÉTELE

- Csúsztassa a tartozékot felülről merőlegesen a szájuhany tetején lévő nyílásba, amíg kattanást nem hall. Közben tartsa úgy a szájuhanyt, hogy ne nyomja meg a  gombot.
- A tartozék eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva az **A2** gombot, és húzza ki a tartozékot merőlegesen felfelé a nyílásból.



Figyelmeztetés:

Ne vegye ki a tartozékot, amíg a szájuhany működésben van.

ÜZEMMÓDOK ÁTTEKINTÉSE

- A szájuhany három üzemmóddal rendelkezik:
 - **Pulse üzemmód:** a vízsugár rövid időközönként folyik ki, ami ideális a fogak és az íny tisztítására és masszírozására;
 - **Soft üzemmód:** az alacsony vízáramlás gyengéd tisztítást tesz lehetővé; érzékeny fogakkal rendelkezők és azok számára, akik először használják a szájuhanyt;
 - **Normal üzemmód:** mindennapos használatra alkalmas üzemmód.

A SZÁJZUHANY HASZNÁLATA (C ÁBRA)

- Győződjön meg arról, hogy a szájuhany megfelelően össze van szerelve, fel van töltve, és a víztartály tele van.
- Mosson fogat és fogínyt, öblítse ki a száját tiszta vízzel.

1. Csúsztassa a tartozékot a félig nyitott szájába, és hajoljon a mosogató fölé, hogy a víz és a kiöblített ételmaradék-maradványok kiürüljenek.
2. A  gombbal kapcsolja be a szájuhanyt.
3. Üzemmódváltáshoz nyomja meg többször a  gombot a szájuhany bekapcsolását követő 5 másodpercen belül. A kiválasztott üzemmód jelzőfényke kigyullad.
4. Irányítsa a vízsugarat a permetezni kívánt helyre, azaz a fogközökbe, a fogak széleire vagy a fogínyre.
5. Mozgassa a fúvókát lassan az egyik fogközéből a másikba. Így tisztítsa meg az összes külső és belső oldalt.
6. Alaposan permetezze be a fogszabályzókat, koronákat és hidakat.
7. A fogíny masszírozásakor célozzon a fúvókával merőlegesen a fogínyre, és fújja be a fogínyvonalat is.
8. A szájuhany időzítővel van ellátva, amely 1,5 perc működés után automatikusan kikapcsolja. Ha hamarabb kell kikapcsolnia a szájuhanyt, nyomja meg a  gombot.
9. Csak akkor távolítsa el a fúvóka doldóelemet a szájából, ha a szájuhany ki van kapcsolva.



Figyelmeztetés:

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a toldóelem nem sérült-e. Soha ne használja a szájuzuhanyt sérült toldóelemmel.



Megjegyzés:

A szájuzuhany a legutóbbi kikapcsolás előtt több mint 10 másodpercig működő legutóbbi üzemmódban fog elindulni.

- Amint nem jön ki víz a fűvókából, a víztartály kiürült. Kapcsolja ki a szájuzuhanyt a  gombbal, és töltsse fel a vizet a VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE részben leírtak szerint. Amikor újra bekapcsolja, a szájuzuhany automatikusan elindul az utoljára kiválasztott üzemmódban.
- Ha először használja a szájuzuhanyt, javasoljuk a **Soft** üzemmód használatát.



Figyelmeztetés:

A szájuzuhany első néhány használata során enyhe fogínyvérzést észlelhet. Ez normális jelenség, és általában 1-2 hét után megszűnik.



Figyelmeztetés:

Forduljon kezelőorvosához, ha erős fogínyvérzést észlel, orvosi beavatkozáson esett át a szájúregében, sérült az ínye vagy nyílt seb van a szájúregében.



Figyelmeztetés:

Ne használja a szájuzuhanyt, ha az fájdalmat, kellemetlen érzést, szédülést vagy hányingert okoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés:

Legfeljebb 50 °C-os vizet vagy semleges tisztítószerrel használjon a szájuzuhany tisztításához. A tisztításhoz ne használjon drótkefét, hígítót vagy súroló hatású tisztítószerrel stb., nehogy megsérüljön a tisztított felület. Tisztításkor ne merítse vízbe a szájuzuhanyt.

VÍZTARTÁLY

- Nyissa ki a tartály töltőnyílás kupakját, és öntse ki a maradék vizet a tartályból. Zárja le a kupakot.
 - Indítsa el a szájuzuhanyt, hogy eltávolítsa a tartályból és a tömlőből a maradék vizet. Amikor a víz már nem folyik, kapcsolja ki a szájuzuhanyt.
 - Nyissa ki a tartály töltőnyílás kupakját, és hagyja a tartályt megszáradni.
-

SZÁJZUHANY

- A szájjuhanyt törölje meg tiszta száraz ronggyal. Erős szennyeződés esetén használhat enyhén nedves rongyot is. Ezután törölje szárazra rendszeren a megtisztított felületet.



Figyelmeztetés:

A szájjuhany felső része, amelyben az akkumulátort tárolják, nem alkalmas csap alatti mosásra. A szájjuhanyra sem a töltőkábelére ne permetezzen vizet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

TOLDALÉKOK

- Minden használat után öblítse át a használt tartozékokat vízzel, hogy megakadályozza a lerakódások kialakulását. Ezután mossa le a tartozék felületét vízzel, majd mindig törölje szárazra egy puha ruhával. Higiéniai okokból javasoljuk, hogy a használt tartozékokat félévente cserélje ki.

VÍZKŐLERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA

- A felhasznált víz ásványianyag-tartalmától függően keményvíz-lerakódások halmozódhatnak fel a tartályban, a szívótömlőben vagy a toldalékban és a fűvókában. Ezek negatívan befolyásolhatják a szájjuhany működését és csökkenthetik annak teljesítményét. Ezért fontos a lerakódások rendszeres eltávolítása.
- A lerakódások eltávolításakor az alábbiak szerint járjon el:
 - Üritse ki a víztartályt, és öntsön bele tiszta, meleg vizet (max. hőmérséklet: 85 °C).
 - Irányítsa a fűvókát a mosogatóba, és indítsa el a szájjuhanyt.
 - Üritse ki a tartály teljes tartalmát.
 - Szükség szerint ismételje meg az egész folyamatot.
- A használt víz keménységétől függően 1-3 havonta ismételje meg a lerakódás eltávolítási eljárást a szájjuhany teljesítményének fenntartása érdekében.

TÁROLÁS

- Használat után készítse elő a szájjuhanyt a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben leírtak szerint. A szájjuhanyt tartsa száraz helyen, közvetlen napfénytől védve. Ha hosszabb időre el szeretné tenni a szájjuhanyt, javasoljuk, hogy vegye ki a víztartályt a fogantyúból.

Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Víz távozik a toldóelem vége és a szájjuhany teste közötti térből.	A toldóelem tömítése sérült vagy kopott.	Cseréltesse ki a tömítést vagy a fűvókát.
	A toldóelem rosszul van felhelyezve.	Távolítsa el a toldóelemet, és helyezze vissza.
Víz szívárog a víztartályból.	A töltőnyílás kupak nincs rendszeren lezárva.	Zárja le a töltőnyílás kupakot.

A víz nyomása nagyon alacsony.	A fűvóka szennyeződéssel van eltömődve.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fűvókát.
	A fűvóka deformálódott.	Cserélje ki a fűvókát.
	A szájzuhany nincs megfelelően feltöltve.	Töltse fel a szájzuhanyt.
A szájzuhany kicsomagolás után nem működik.	A szájzuhany nincs megfelelően feltöltve.	Töltse fel a szájzuhanyt.
A szájzuhanyból nem jön ki víz.	A víztartály üres.	Töltse fel a vizet.
	Használat közben a zuhany túlságosan meg van döntve.	Tartsa a zuhanyt a lehető legfüggőlegesebb helyzetben.

MŰSZAKI ADATOK

Szájzuhany

Méret toldóelemmel (ma × mé × sz).....	135 x 45 x 70 mm
Súly toldóelemmel együtt.....	235 g
Tartály térfogat	120 ml
Szivattyúfrekvencia.....	1600 impulzus/perc
Víznyomás	30–90 PSI
Töltési idő	3,5 óra
Üzemidő.....	40 perc
Káros vízbehatolás elleni védelem.....	IPX7

Beépített akkumulátor

Típus	Li-ion 1100 mAh, 3,7 A
-------------	------------------------

AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

- A termék megsemmisítése vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell az akkumulátor eltávolításáról. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz. Megfelelő megsemmisítéséről az illetékes gyűjtőhely gondoskodik.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.